

snoreeze
Snoring relief

nasal strips


snoreeze
Schnarchlinderung

Nasenstrips

How do Snoreeze Nasal Strips work?

Snoreeze Nasal Strips target snoring caused by a cold, allergies or a blocked nose. Their flexible bands gently open the airways and improve airflow to provide effective snoring relief.

Using Snoreeze Nasal Strips is simple.

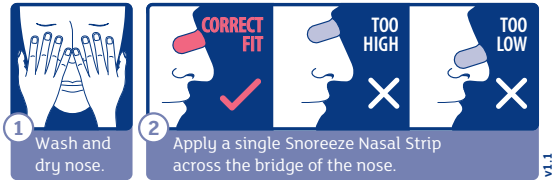

Precautions

For external use only. Keep out of reach of small children. Do not place over damaged skin. If skin irritation occurs, discontinue use immediately. Do not use for more than 12 hours per day.

Please note

There is no guaranteed 'cure' for snoring. However, Snoreeze Nasal Strips can relieve the symptoms of snoring to help provide a peaceful night's sleep for you and your partner. Snoreeze Nasal Strips are not a cure for sleep apnoea (a related respiratory medical condition). You may be suffering from sleep apnoea if you stop breathing during sleep, wake-up tired or fall asleep easily during the day. If you experience any of these symptoms it is recommended that you consult your doctor.

For more information visit www.snoreeze.com

Wie wirken Snoreeze Nasenstrips?

Snoreeze Nasenstrips wirken gegen Schnarchen wegen einer Erkältung, Allergien oder einer verstopften Nase. Ihre flexiblen Streifen öffnen sanft die Atemwege und verbessern den Luftfluss für eine effektive Schnarchlinderung.

Die Anwendung von Snoreeze Nasenstrips ist einfach.



Vorsichtsmaßnahmen

Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht bei geschädigter Haut anwenden. Bei auftretender Hautreizung Anwendung sofort unterbrechen. Nicht länger als 12 Stunden pro Tag verwenden.

Hinweis

Es gibt keine garantierte Heilung für das Schnarchen. Snoreeze Nasenstrips können die Symptome des Schnarchens verringern und Ihnen und Ihrem Partner zu einem erholsamen Schlaf verhelfen. Snoreeze Nasenstrips sind kein Heilmittel für Schlafapnoe (eine Erkrankung der Atemwege mit ähnlichen Symptomen). Wenn Ihre Atmung nachts häufiger aussetzt, Sie müde und abgeschlagen aufwachen oder tagsüber leicht einschlafen, leiden Sie möglicherweise unter Schlafapnoe. Sollten Sie diese Symptome bei sich feststellen, dann ist ein Arztbesuch empfehlenswert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.snoreeze.com

Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, United Kingdom
Telephone Helpline 0800 096 11 21



Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, Großbritannien
Telefonankunftsstelle +44 (0) 151 550 4700



snoreeze
Alivio de los ronquidos

tiras nasales

doucenuit
Anti-ronflement

bandelettes nasales

¿Cómo funcionan las tiras nasales Snoreeze?

Las tiras nasales Snoreeze alivian los ronquidos ocasionados por los resfriados, las alergias o la nariz tapada. Sus bandas flexibles abren suavemente las vías respiratorias y aumentan el aporte de aire, proporcionando un alivio eficaz de los ronquidos.

Usar las tiras nasales Snoreeze es fácil.



Precauciones

Administración únicamente externa. Mantener fuera del alcance de los niños. No colocar sobre piel deteriorada. Si aparece irritación cutánea, hay que dejar de usar las tiras de inmediato. No usar durante más de 12 horas al día.

Tenga en cuenta lo siguiente:


No existe una "cura" garantizada para el problema de los ronquidos. No obstante, las tiras nasales Snoreeze pueden aliviar los síntomas de los ronquidos para ayudarles, a usted y a su pareja, a dormir tranquilamente por la noche. Las tiras nasales Snoreeze no son una cura para la apnea del sueño (una afección respiratoria relacionada). Si deja de respirar momentáneamente mientras duerme, si siente cansancio al despertar o si le entra sueño con facilidad durante el día, es posible que padezca apnea del sueño. Si tiene alguno de esos síntomas, le recomendamos que consulte al médico.

Para obtener información adicional, visite el sitio web www.snoreeze.com

Comment fonctionnent les bandelettes nasales Doucenuit ?

Les bandelettes nasales Doucenuit ciblent les ronflements causés par un rhume, des allergies ou un nez obstrué. Leurs bandes flexibles ouvrent doucement les voies aériennes et améliorent le passage de l'air afin de fournir un soulagement efficace contre le ronflement.

Les bandelettes nasales Doucenuit sont faciles à utiliser.

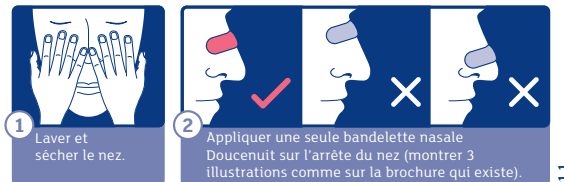

Précautions d'emploi

Uniquement à usage externe. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas utiliser sur une peau irritée. Si une irritation de la peau survient, arrêter immédiatement l'utilisation du produit. Ne pas utiliser plus de 12 heures par jour.

Veillez noter

Il n'existe pas de « cure » garantie contre le ronflement. Toutefois, les bandelettes nasales Doucenuit peuvent soulager les symptômes du ronflement afin de vous aider, vous et votre partenaire, à retrouver des nuits paisibles. Les bandelettes nasales Doucenuit ne sont pas une cure contre l'apnée du sommeil, une pathologie respiratoire apparentée. Il se peut que vous souffriez d'apnée du sommeil si vous arrêtez de respirer au cours de votre sommeil, si vous vous réveillez fatigué(e) ou si vous vous endormez facilement au cours de la journée. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, il vous est conseillé de consulter votre médecin.

Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.Doucenuit.com

Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, Reino Unido
Asistencia telefónica +44 (0) 151 550 4700



Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, Royaume-Uni
Assistance téléphonique +44 (0) 151 550 4700



snoreeze
Anti-russamento

cerotti nasali

Come funzionano i cerotti nasali Snoreeze?

I cerotti nasali Snoreeze sono utili per il russamento causato da raffreddore, allergie o naso chiuso. Le loro bande flessibili aprono delicatamente le vie aeree, migliorano il passaggio dell'aria e riducono il russamento.

Utilizzare i cerotti nasali Snoreeze è semplice.



Precauzioni

Solo per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non applicare sulla pelle rovinata. In caso di irritazione cutanea sospendere immediatamente l'uso. Non utilizzare per oltre 12 ore al giorno.

Nota bene

Non esiste una 'cura' sicura per non russare. Tuttavia, i cerotti nasali Snoreeze sono in grado di ridurre i sintomi del russamento, consentendo di trascorrere una notte di tranquillo riposo a voi e al vostro partner. I cerotti nasali Snoreeze non sono un rimedio contro l'apnea notturna (un disturbo respiratorio associato). È possibile che soffiate di apnea notturna se smettete di respirare durante il sonno, vi svegliate stanchi o vi addormentate facilmente durante il giorno. Se avete uno di questi sintomi raccomandiamo di consultare il vostro medico.

Per maggiori informazioni visitare www.snoreeze.com

Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, Regno Unito
Hotline telefonica +44 (0) 151 550 4700



snoreeze
Tegen snurken

neusstrips

Hoe werken Snoreeze neusstrips?

Snoreeze neusstrips helpen tegen snurken bij een verkoudheid, door allergie of een verstopte neus. Ze openen de luchtwegen, verbeteren de luchtstroom en helpen daarmee tegen snurken.

Snoreeze neusstrips zijn eenvoudig te gebruiken.



Voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik Buiten het bereik van kinderen houden. Niet aanbrengen op beschadigde huid. Stop in geval van huidirritatie onmiddellijk met het gebruik van het product. Het product niet langer dan 12 uur per dag gebruiken.

Opmerking:

Hét geneesmiddel tegen snurken bestaat niet, maar Snoreeze neusstrips kunnen wel de symptomen van snurken verlichten zodat u en uw partner van een goede nachtrust kunnen genieten. Snoreeze neusstrips helpen niet bij slaapapneu (een slaapstoomis met ademstilstand). Als u tijdens het slapen stopt met ademen, vermoeid wakker wordt of overdag snel in slaap valt, hebt u mogelijk slaapapneu. Als u last hebt van deze symptomen is het raadzaam met uw arts te overleggen.

Ga voor meer informatie naar www.snoreeze.com

snoreeze
Alívio do ressonar

tiras nasais

Como funcionam as tiras nasais Snoreeze?

As tiras nasais Snoreeze foram criadas para o ressonar causado por uma constipação, alergias ou nariz congestionado. As bandas flexíveis abrem suavemente as vias aéreas e melhoram o fluxo de ar para oferecer um alívio efectivo do ressonar.

Utilizar as tiras nasais Snoreeze é simples.



Precauções

Apenas para utilização externa. Manter fora do alcance de crianças pequenas. Não colocar sobre pele danificada. Se ocorrer irritação dérmica, interrompa a utilização imediatamente. Não utilizar durante mais de 12 horas por dia.

Atenção

Não existe uma 'cura' garantida para o ressonar. No entanto, as tiras nasais Snoreeze podem aliviar os sintomas do ressonar para ajudar a oferecer uma noite de sono tranquilo para si e respectivo parceiro(a). As tiras nasais Snoreeze não são uma cura para a apneia do sono (uma condição médica respiratória relacionada). Pode sofrer de apneia do sono se tiver interrupções de respiração durante o sono, acordar cansado ou adormecer facilmente durante o dia. Se tiver algum destes sintomas, é aconselhável que consulte o seu médico.

Para mais informações, consulte www.snoreeze.com

Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, Reino Unido
Linha telefónica de ajuda +44 (0) 151 550 4700



snoreeze
لتخفيف أعراض الشخير

شرائح أنفية

كيف تعمل شرائح سنوريز الأنفية؟

تستهدف شرائح سنوريز الأنفية الشخير الناتج عن حالات البرد، أو الحساسية أو إنسداد الأنف. وإن أربطتها المرنة تفتح مسارات الهواء برفق وتُحسّن من سريان الهواء لتوفير علاج فعال لتخفيف حدة الشخير.

استعمال شرائح سنوريز الأنفية يتميز بالبساطة.



الاحتياطات

للإستعمال الخارجي فقط. يُحفظ بعيداً عن تناول الأطفال الصغار. لا تضعه على الجلد المجروح أو التالف. في حالة حدوث تهيج للجلد أوقف إستعماله فوراً. لا تستعمله لأكثر من 12 ساعة في اليوم.

يُرجى الملاحظة

لا يوجد "شفاء" مضمون للشخير. ولكن يمكن لشرائح الأنف سنوريز أن تُخفف من أعراض الشخير لتساعد في توفير نوم هادئ طوال الليل لك ولشريك حياتك. وإن شرائح الأنف سنوريز ليست علاجاً شافياً لتوقف التنفس والاختناق أثناء النوم sleep apnoea (حالة طبية ترتبط بالجهاز التنفسي). فرما تعاني من الإختناق أثناء النوم إذا توقفت عن التنفس أثناء النوم أو إذا إستيقظت وأنت في حالة مرهقة ومتعبة أو نعست بسهولة أثناء النهار. فإذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض نوصي بأن تستشير طبيبك.

لمزيد من المعلومات زوروا موقع الإنترنت www.snoreeze.com

Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
Pioneer House, Pioneer Business Park, North Road,
Ellesmere Port, CH65 1AD, United Kingdom
رقم الهاتف للمساعدة ٠٨٠٠ ٠٩٦ ١١ ٢١

